

Restore Hydrogel

For maintaining a moist wound environment

Pour maintenir un milieu humide pour les plaies


Para mantener un ambiente húmedo en la herida

INDICATIONS: Maintenance of a moist environment in stages II - IV pressure ulcers, stasis ulcers, 1st and 2nd degree burns, skin tears, cuts and abrasions.

DIRECTIONS: Cleanse wound, if indicated. Apply Restore Hydrogel to cover wound to minimum depth of 5mm (1/5"). Cover with secondary dressing as required. Change Restore Hydrogel every 24 to 72 hours, or as required to maintain moist environment.

WARNINGS: External use only. Avoid eye contact. If condition worsens or does not improve within seven days, consult a physician. Keep out of reach of children. In case of ingestion, seek professional help.

INGREDIENTS: Deionized water, glycerin USP 99.7%, sodium polyacrylate, propylene glycol USP, hyaluronic acid, sodium metabisulfite FCC, methylparaben NF, propylparaben NF.

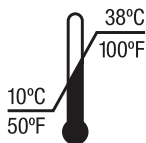

INDICATIONS: Maintien d'un milieu humide pour les plaies de pression de stade II - IV, ulcères de la jambe, brûlures du 1^{er} et 2^{er} degré, déchirures de la peau, lacérations et abrasions.

MODE D'EMPLOI: Nettoyer la plaie, s'il y a lieu. Appliquer une couche de 1/5 po (5mm) minimum d'Hydrogel Restore sur la plaie. Recouvrir d'un pansement tel que requis. Changer l'Hydrogel Restore toutes les 24 à 72 heures, ou au besoin pour maintenir un milieu humide.

MISE EN GARDE: Pour usage externe seulement. Éviter tout contact du produit avec les yeux. Si l'état de la plaie se détériore ou ne s'améliore pas dans les sept jours qui suivent, consulter un médecin. Tenir hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter un professionnel de la santé.

INGRÉDIENTS: Eau déionisée, glycérine USP 99,7%, polyacrylate de sodium, propylène-glycol USP, acide hyaluronique, métabisulfite de sodium FCC, methylparaben NF, propylparaben NF.

INDICACIONES: Para el mantenimiento de un ambiente húmedo en úlceras por presión en grados de II al IV, úlceras por estasis venosas, quemaduras de 1° y 2° grados, laceraciones de la piel, cortadas y raspaduras o abrasiones.

INSTRUCCIONES: Limpie la herida, si está indicado. Aplique Restore Hydrogel para cubrir la herida a una profundidad mínima de 5 mm (1/5"). Cubra con un apósito secundario si se requiere. Cambie el Restore Hydrogel cada 24 a 72 horas, o el tiempo necesario para mantener el ambiente húmedo.

PRECAUCIONES: Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Si la condición de la herida empeora o no mejora en siete días, consulte a su médico. Consérvese fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, busque ayuda profesional.

INGREDIENTES: Agua desionizada, glicerina USP 99.7%, poliacrilato de sodio, propilenglicol USP, ácido hialrónico, metabisulfito de sodio FCC, metilparabeno NF, propil parabeno NF.

HOW SUPPLIED:

Stock No.	Product Size	Qty/Box
529974	3 oz. (89mL) tube	12

Manufactured for:

Hollister Wound Care, LLC
Libertyville, Illinois 60048 USA

Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par
Hollister Limited
Aurora, Ontario L4G 1G3


Complex Problems. Innovative Solutions.

hollisterwoundcare and wave logo are trademarks of Hollister Incorporated. Restore is a trademark of Hollister Wound Care, LLC.

hollisterwoundcare et le logo de wave sont des marques de commerce de Hollister Incorporated. Restore est une marque de commerce de Hollister Wound Care, LLC.

hollisterwoundcare y logotipo de wave son marcas registradas de Hollister Incorporated. Restore es una marca registrada de Hollister Wound Care, LLC.

©2011 Hollister Wound Care LLC