

Restore

Wound Cleanser

Helps cleanse dermal wounds
Aide à nettoyer les plaies cutanées
Ayuda a limpiar heridas dérmicas

INDICATIONS: Helps remove particulate matter and other debris from dermal wounds.

DIRECTIONS: Spray wound and surrounding area. If necessary, allow debris to soften. No rinsing necessary.

WARNINGS: For external use only. Avoid contact with eyes. Consult a physician for animal bites, deep puncture wounds and serious burns, or if condition worsens and does not improve within seven days. Keep out of reach of children. In case of ingestion, seek professional help.

INGREDIENTS: Purified water, poloxamer 188, potassium phosphate, phenoxyethanol, sodium chloride, methylparaben, sodium hydroxide, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, isobutylparaben.

INDICATIONS: Aide à retirer les particules et autres débris des plaies cutanées.

MODE D'EMPLOI: Pulvérisez la plaie et la périphérie. Au besoin, laissez les débris amollir. Aucun rinçage nécessaire.

MISE EN GARDE: Réservé à l'usage externe. Évitez tout contact avec les yeux. Consultez un médecin pour les morsures d'animaux, les plaies punctiformes profondes et les brûlures graves, ou si l'état empire et ne s'améliore pas après sept jours. Garder hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez un professionnel.


INGRÉDIENTS: Eau purifiée, poloxamer 188, phosphate de potassium, phénoxyéthanol, chlorure de sodium, méthylparaben, hydroxide de sodium, éthylparaben, propylparaben, butylparaben, isobutylparaben.

INDICACIONES: Ayuda a quitar partículas y otros residuos de las heridas dérmicas.

INSTRUCCIONES: Rocíe la herida y el área circundante. Si fuera necesario, deje que los residuos se ablanden. No se necesita enjuagar.

PRECAUCIONES: Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos. Consulte a un médico en casos de mordeduras de animales, heridas punzantes profundas y quemaduras graves, o si una condición empeora y no mejora en un plazo de siete días. Mantenga fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, obtenga atención profesional.

INGREDIENTES: Agua purificada, poloxamer 188, fosfato de potasio, fenoxietanol, cloruro de sodio, metilparabeno, hidróxido de sodio, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno, isobutilparabeno.

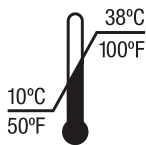


Complex Problems. Innovative Solutions.

HOW SUPPLIED:

Stock No.	Product Size	Qty/Box
529975	8 oz. (236mL) pump spray	12
529976	16 oz. (354mL) pump spray	12

Manufactured for:
Hollister Wound Care, LLC
Libertyville, Illinois 60048 USA

Distributed in Canada by:
Distribué au Canada par
Hollister Limited
Aurora, Ontario L4G 1G3